



**Stoltrapphiss
för svängd trapp**

Mercurius II

Globus Mercurius II



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

VARFÖR SKA MAN VÄLJA EN GLOBUS MERKURIUS II?

Fördelar med Globus Mercurius II

Globus Mercurius II kan gå i alla innersvängar upp till 70° stigning, vilket är så gott som alla trappor inklusive spiraltrappor.

Globus Mercurius II är den hiss där skenan ligger närmast trappstegen och klarar 70° lutning.

Varför ska man placera en stoltrapphiss i innersvängen?

Hissen/skenan kommer inte att vara i vägen för andra gående personer och därmed har man undvikit att tvinga dessa att gå på de smalaste delarna av trappen. Helt enkelt säkrare.

Varför är det bra med automatisk stolsvridning?

Automatvridning av stolen är en mycket bra, och framför allt, säker lösning. Stolen kan med fördel stanna där trappen slutar på övre plan och där vrida in 90° över planet för en säker av- och påstigning.

Inga handtag och problem med låsning av stolen, bara att hålla joysticken till dess stolen är i sitt programmerade läge. Om man fäller ihop stolen och låter den stå kvar i 90° i trappen, då kommer stolen att ha en funktion till, att fungera som grind. En säkerhet för många som måste passera trappen under natten för att gå på toaletten. Vid nedersta planet kan stolen vrida ut i en vinkel som passar användaren och gör av- och påstigning så bekväm som möjligt. Det finns dock tillfällen när man behöver

gå med skenan 90° eller 180° och parkera stolen, vid nedre och/eller övre plan. Globus Mercurius II klarar naturligtvis även detta.

Globus Mercurius II är formad som en stol vilket gör den extra bekväm att sitta i.

Globus Mercurius II har ingen fällskena utan startar med en så kallad svanhals. Antingen 200 mm eller 100 mm från trappnos. Fördelen med att inte behöva fällskena är att man därigenom tagit bort en potentiell felkälla, inte direkt ovanligt, och säkerhetsrisk. Är säkerhet, bekvämlighet och estetik den viktigaste faktorn vid val av stoltrapphiss är valet enkelt, man väljer en Globus Mercurius II.

När ska man välja en Globus Mercurius stoltrapphiss?
– *Varje gång!*

Tillval Mercurius II

Tillval som ingår

Vinylklädsel färg



Textilklädsel färg



Skena färg



Tillval som kostar extra

Läderklädsel: Elegant 2-färgad



Läderklädsel: Deluxe 1-färgad



Tillval som kostar



Ergonomisk joystick

Som ett resultat av studier med ergonomer har en ergonomisk joystick designats. Ergonomerna påvisade fakta att många äldre inte har styrkan att använda enbart ett finger för att hantera en joystick. För att lätt kunna hantera en joystick måste det vara möjligt för dem att fördela styrkan och använda alla musklerna i hand och arm. Vår ergonomiska joystick möter nu dessa kriterier.



Ledsagarkontroll

Med ledsagarkontroll kan en ledsagare köra trapphissen upp och ner längs skenan om inte brukaren själv är kapabel att köra trapphissen.

Armstödsdesign

Mercurius II kan utrustas med två olika typer av armstöd, raka eller böjda, för större säkerhetskänsla. *Obs!* Med den automatiska vridningsfunktionen är böjda armstöd obligatoriska.



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.


E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

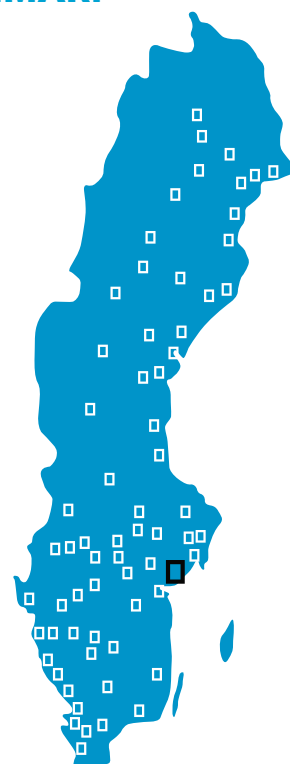


■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor

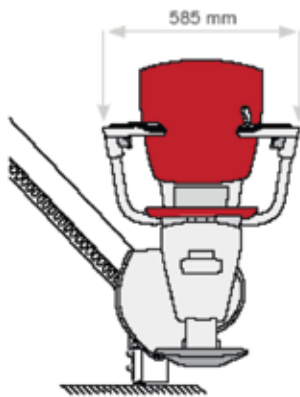

Frontvy i ovikt position

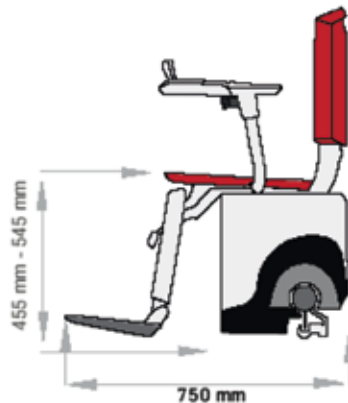

Sidovy i ovikt position

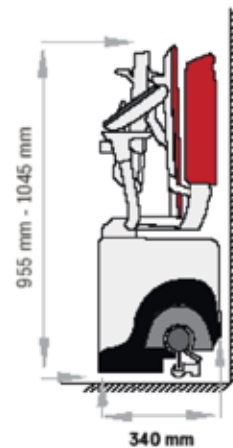

Sidovy i vikt position

Stol dimensioner

Mellan armstöden 450–470 mm

Sitshöjder

Fem höjder från golv till sits:

- 575 mm (manuell vridning)
- 552 mm (manuell vridning)
- 530 mm (manuell vridning)
- 507 mm (bara tillgängligt med automatisk vridning)

Fotstödshöjder

Standard 75 mm från golv till överkant fotstöd, fem höjder mellan fotstöd och sits:

- 500 mm
- 477 mm
- 455 mm
- 432 mm
- 410 mm

Teknisk data

Lyftkapacitet	125 kg	Elanslutning	1-fas 2, 5A för batteriladdare
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Ytbehandlad åkskena	Pulverlackerad	Motor	24 V DC
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen	Stigning	-70°–70°
Drivsystem	Batteri, kuggstång	Trappbredd	Från 70 cm och bredare

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

**GLOBUS
DIREKT**

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

**GRÖNA
GLOBUS**

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®