




**Stoltrapphiss
för rak trapp**

Lupus Extra

LAGERVARA!

**INSTALLATION
NORMALT INOM
1-2 VECKOR**

**AUTOMATISK
VRIDNING AV SITS**

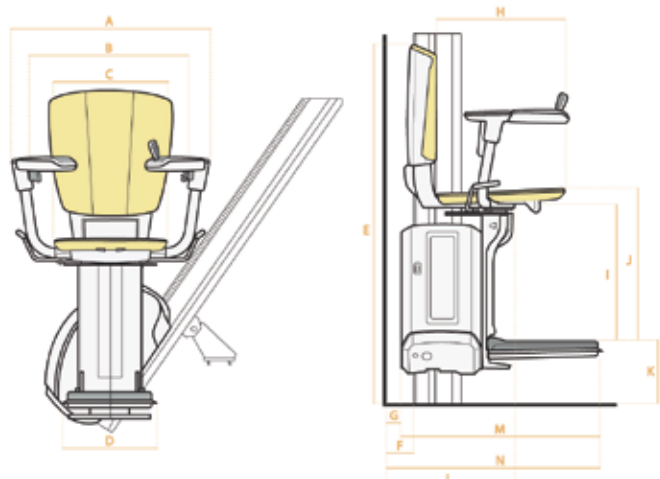

Måttuppgifter

A	655 mm	H	410 mm
B	485 mm	I	400 mm
C	422 mm	J	478 mm
D	295 mm	K	115 mm
E	963 mm	L	368 mm
F	74 mm	M	598 mm
G	34 mm	N	632 mm



Automatisk vridsits

Automatisk stolsvridning vid övre plan innebär en ökad säkerhet då den som använder hissen per automatik vrids in över stannplanet genom att fortsätta hålla den s.k. joysticken.

Om automatisk stolsvridning används finns det inga risker att stolen ej är låst i sitt vridläge. Det innebär att det inte finns någon risk att stolen rör sig vid i- och urstigning.



Fjärrmanövrering

Väl designade fjärrmanöverreglage placeras vid båda stannplanen och de kan användas för att kalla på och sända iväg hissen, vilket gör att flera brukare kan använda hissen.

Fällskena

Fällskena används oftast när dörr eller öppning ligger närmare trappen än 500 mm. Fällskenan innebär att när hissen används så kommer skenan att sticka ut i öppningen



Körkontroll

Hissen körs från armstödet med en lättanvänd joystick. Med ett lätt tryck åt höger eller vänster väljer du om du vill åka uppför eller nerför trappan.



Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte med enkelt "klick"-lås finns alltid till hands för säker och trygg färd.

och omvänt, när hissen inte används så fälls den nedersta delen av skenan upp och ser därmed till att inget hinder finns i öppningen.



Teknisk data

Lyftkapacitet	125 kg vid 28°–53°
Lyftkapacitet	146 kg vid 28°–45°
Lyft hastighet	120 mm/sek
Åkskena	Aluminium, anodiserad
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen
Drivsystem	Batteri, kuggstång

Elanslutning	1-fas 1 Amp för batteriladdare
Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Motor	24 V DC
Stigning	28°–53°

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®